Инструкция по применению:
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T015



Редакция 1.1

1. Наименование и юридический адрес производителя
- Производитель:
Foshan Xunlong Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Сюнлун Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)
- Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Bainan Economic Cooperative Society Area, Tangtou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России
ИП Меньшин Никита Владимирович
ИНН 771595880368, ОГРНИП 320774600219763
Контакты для связи: nivo@xyq.msk.ru
Телефон +7 (985) 615 - 72 - 752

3. Наименование медицинского изделия
Наконечник стоматологический турбинный
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T015

4. Комплектность поставки
- Наконечник стоматологический турбинный – 1 шт.
- Тестовый бур – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

5. Назначение по применению
Стоматологическое наконечники NIVO предназначены для закрепления рекламы и полноценных инструментов и передачи им вращения от приводов при проведении стоматологических работ.

6. Классификация медицинского изделия
Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **216740, 119690**
Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – **2а.**
- Потенциал защиты от проникновения влаги и пыли - **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные пользователи
Используется только квалифицированным медицинским персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и область применения
- **Условия применения:** стоматологические кабинеты, зуботехнические лаборатории, клиники и другие лечебно-профилактические учреждения.
- **Область применения:** терапевтическая, ортопедическая и хирургическая стоматология.

9. Показания к применению:
- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление разложившихся материалов и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхности зуба перед установкой ортопедических конструкций.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания
- Применение у пациентов с тяжелой степенью острой сердечности.
- Пациенты с недостаточностью.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременные женщины и дети.

11. Меры предосторожности
- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия и соблюдать все рекомендации и предупреждения.
- Пользователь несет ответственность за операторский навык и соответствие обслуживание с постоянной осмотр изделия. Убедитесь перед использованием в его надежности.
- В случае падения или удара изделия, проверьте работу и убедитесь в отсутствии любых отклонений перед продолжением.
- Используйте только рекомендованные системами и должны быть спецификации перед первым и каждым повторным использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проведите проверку работоспособности на холостых оборотах.
- Использование изделия производится в защитных медицинских перчатках.

12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)
Не было выявлено какой-либо нежелательной реакции или побочных побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предполагаемыми клиническими применениями, указанными в эксплуатационной документации производителя.

13. Риски применения медицинского изделия
Группа управления риском выполнила комплексную совокупный осмотрений риск в соответствии с установленными требованиями. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. После внедрения мер по контролю рисков не возникло новых рисков, а существующие опасности и предварительные опасности остаются на допустимом уровне. В случае появления новых рисков процесс управления будет проводиться повторную оценку риска.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия
NIVO T015 Турбинный наконечник 4 канальный, оптоволоконный, без света. Турбинный стоматологический наконечник оснащен системой подачи смягченного воздуха, обеспечивающей высокую скорость вращения инструмента.Воздух, в первую очередь, проходит через подачу воды и воздуха, оказывая охлаждающий эффект через четыре отверстия в передней части головки. Износостойкая воздух спецдатчик обратно через внутренние каналы наконечника и через отверстие в форсунке. В данной модели изготовлен механизм фиксации боров с чистотехническим 2,4 мм отверстием механизм.

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	139,9 D 103 x 15,50 D (-) x 13,80 D
Масса нетто, г / масса брутто, г	Масса-нетто: не более 120г Масса брутто: не более 300г
Передаточное соотношение	1:1 (тип 1 по ГОСТ ISO 7785-1:2011).
Механизм фиксации бора	Кнопочный
Разрешенный инструмент	ISO 1797-1 Тип 3: диаметр 1,6 мм, длинна +21мм
Биение	Не более 0,03 мм
Уровень излучения опасного из зажимного устройства	Не менее 22 Н
Усилие вставания	Не более 50 Н
Освещение рабочей области	Без света
Разрешенное давление пневмопривода	0,2-0,25 МПа
Скорость вращения при разрешенном давлении	160,000-430,000 об/мин
Крутящий момент привода	Не менее 0,05 Н*см (при 0,25 МПа)
Чистота наконечника	От 4000 до 40000 Гц
Амплитуда	Не более 200мкм
Соединение со шлангом	4 канальное, ISO 3135, тип 2
Подача воды	50мл/мин (при 200 кПа)
Подача воздуха	>1,5 л/мин (при 200 кПа)
Каналы охлаждения воды и воздуха	4, смешанный
Обратный клапан	Есть
Фильтр мотора чистых	Есть
Уровень шума	Не более 68 дБ
Тип оптики	Открытый тип
Тип подшипников	керамические
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Клучи из металлической силиконовой резиновой смеси

15. Маркировка. Условные обозначения и указания



Расшифровка серийного номера:
XXXXXXXX
XX.X.XX.X.XXX
1 2 3 4 5

Кодирование:
1. Последние две цифры года
2. Корреспонденс месяца
3. Часто месяца
4. Модель
5. Порядковый номер последовательность кодирование 001,002,...

Январь — A,
Февраль — B,
Март — C,
Апрель — D,
Май — E,
Июнь — F,
Июль — G,
Август — H,
Сентябрь — I,
Октябрь — J,
Ноябрь — K,
Декабрь — L

Пример: 25A01T001 - дата изготовления изделия 01 января 2025, модель T, порядковый номер 001

16. Упаковка
- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя, имеется внутренняя упаковка.
- Наконечник помещен в полиэтиленовый пакет, в затем целую вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка с бора обеспечивает защиту от загрязнения и воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования.
- При замене наконечника отключите наконечник и шланг с переходником быстросъёмным, переведите быстросъёмный переходник в одной коробке с наконечником, разъем переходника упакован в пластиковый защитный колпачок.

17. Настройка и порядок работы (Указания по эксплуатации)

Приемка и ввод в эксплуатацию.
1. Проверьте на медицинском изделии, проверьте серийный номер на изделии, упаковке и в накладной. Серийный номер на изделии должны совпадать. Гарантия на изделие привязана к данному серийному номеру. Коробку сохранить необходимо.
2. Проверьте на медицинском повреждение корпуса, протестируйте на холостом ходу. Использование изделия принимается до его первой эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию.
1. Проверьте соответствие настроек бормашины (стоматологической установки) на соответствие техническим параметрам изделия, изложенным в пункте 14. Описание, технические характеристики, функциональные характеристики.
ВАЖНО! Для изделия на бормашине (стоматологической установке) будет выше рекомендованного +0.025 кгТа, то это приведет к ускоренному износу подшипников, а также к изгибам вращающейся оптики вплоть до вращения бора и возможному повреждению корпуса наконечного спрея.

2. Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели:
Внешнее состояние.
- Изделие должно быть чистым, не должно быть царапин и вмятин.
- Визуально оценка чистых внутри либо на изделии.

Подача воды.
- Должна равномерную поступать из всех каналов и все струйки воды должны перекрываться на кончике бора.
- Если струйки не попадают на бор, то проверьте рекомендованное давление на установке (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).
- Если вода на идет с 1-2 каналов, то проверьте обилие и давление подачи воды (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).

Подача воздуха.
- Инструмент (бор) должен свободно вставляться и выниматься при нажатии на кнопку.
- Проверьте, что инструмент вставлен на максимальную глубину и вы не можете вставить его дальше.

Кнопка
- Кнопка на должна спокучиваться рукой, удостоверьтесь что вы не можете это сделать, и она надежно закреплена.

Вращение бора
- Вставьте новый инструмент (бор) в наконечник, медленно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно без биения и без посторонних шумов. Затем подайте рабочее давление и проверьте работу наконечника на холостых оборотах, бор должен вращаться равномерно, не вибрировать и без колебаний на кончике.
- Изделие готово к работе.
- Имейте в виду, что такую проверку рекомендуем проводить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.


18. Способ применения.
1. Установка наконечника.
- Вставьте наконечник в соответствующий разъем шланга совместимой бормашины (см. пункт 19 Технические инструкции «Другими медицинскими изделиями») и затяните гайку соединительного разъема шланга. Предварительно соедините наконечник с переходником (приминимо для моделей с переходником в комплекте). Убедитесь, что наконечник надежно подсоединен к шлангу.
2. Отсоединение наконечника
- Отпустите гайку соединительного разъема шланга и отсоедините наконечник от шланга.
3. Установка бора
- Нажмите кнопку зажима в продольном бор в зажим до предельного состояния, затем отпустите кнопку. Проверьте надежность фиксации бора рукой.
4. Извлечение бора
- Нажмите кнопку зажима и, удерживая ее, извлеките бор.
ВАЖНО! Извлечение инструмента (бора) допускается только после полной остановки вращения. В противном случае, струями, от износа металла при соприкосновении, попадет в подшипники, что приведет к их преждевременному выходу из строя.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.
Конструкция, размеры и рекомендуемые наконечниковых должны соответствовать требованиям ISO 3964. Бора и прочий инструмент по ISO 1797. Изделие может использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует стандарту IEC 60601-1.
Изделие применимо совместно с боровыми (стоматологической установкой), например:
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 24.06.2009 г. «Установка стоматологическая «Sigeri» с принадлежностями в следующем исполнении: S30, S60, S90, U100, U200, U300,
Производитель: "Жуцзи Сайлигер Медикал Инвестмент Ко., Лтд. Китай, Zhuhai Sigei Medical Equipment Co., LTD, Building 2, No. 1, Chuangxin Yi Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

20. Требования к ремонту
Пользователь не должен самостоятельно производить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованную службу либо производителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).
В процессе использования влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае накопления грязи в труднодоступных местах, используйте мягкую щетку для очистки.
Внимание!
- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечник под краном воды.
- не допускается дезинфекция в ультразвуковой ванне.

Смазка (уходные)
- Вытащите инструмент из наконечника, оберните голову наконечника сухой салфеткой для контроля за чистой инструмента) наконечника.
- Подайте спрей на балончика сильных нажатиях в течение двух секунд. Держите наконечник вертикально (рис. 1). Насадка должна быть с носиком диаметром меньше диаметра рабочего инструмента.
- Вставьте наконечник в руку головкой вниз, подайте спрей сильных нажатиях со стороны подключения к установке (бор защищен) наконечника в течение 2 секунд (рис. 2). Держите руками спрей на салфетке - повторите.
- Подключите к установке и включите на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса воздушным потоком.

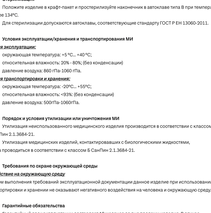

Внимание!
В случае попадания воды или на наконечнике во время его использования - чистку проводить сразу после окончания работы.

22. Стерилизация
- Положите изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклаве типа В при температуре не более 134°С.
Для стерилизации допускается автоклавы, соответствующие стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации/хранения и транспортирования МИ
Условия эксплуатации:
- окружающая температура: +5 °С ... +40 °С;
- относительная влажность: 20% - 80%, (без конденсации)
- давление воздуха: 860 гПа-1060 гПа.

Условия транспортирования и хранения:
- окружающая температура: -20°С ... +50°С;
- относительная влажность: <93%, (без конденсации)
- давление воздуха: 500 гПа-1000 гПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ
Утилизация наконечника/медицинского изделия производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.
- Изношенные медицинские изделия, контактировавшие с биологическими жидкостями, должна проводиться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды
Воздействие на окружающую среду
С учетом назначения требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировании и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства
- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае отсутствия 12 месяцев со дня производства, продавец, сервисная служба либо уполномоченный представитель имеет право запросить товарную накладную, подписанную обоими сторонами для определения срока гарантии.
- Гарантия не распространяется в изделия из-его компонентов, подвергшиеся естественному износу, но не ненадлежащей нормальной его эксплуатации.
- Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеется деформация корпуса в следствие механического повреждения.

27. Срок службы
Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, ввиду в эксплуатации должен быть в течение 1 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов
ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р ИСО 10323-1, СанПин 2.1.3684.