Инструкция по применению:
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T100



Редакция 1.1

1. Наименование и юридический адрес производителя
- Производитель:
Foshan Xunfeng Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Сюньфэн Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)
- Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Bairen Economic Cooperative Society Area, Tangtou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России
ИП Меньшин Никита Владимирович
ИНН 771595880268, ОГРНИП 320774600219763
Контакты для связи: почта info@xyq.msk.ru
Телефон +7 (985) 610 - 72 - 752

3. Наименование медицинского изделия
Наименование медицинского изделия:
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T100

4. Комплектность поставки
- Наконечник стоматологический турбинный - 1 шт.
- Тестовый бор - 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

5. Назначение по применению
Стоматологические наконечники NIVO предназначены для закрепления рекламных и полировочных инструментов и передачи им вращения от турбины при проведении стоматологических работ.

6. Классификация медицинского изделия
Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **216740, 119690**
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **2а.**
- По степени защиты от проникновения влаги и пыли: **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные пользователи
Используется только квалифицированным медицинским персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и область применения
- **Условия применения:** стоматологические кабинеты, зуботехнические лаборатории, клиники и другие лечебно-профилактические учреждения.
- **Область применения:** терапевтическая, ортопедическая и хирургическая стоматология.

9. Показания к применению:
- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление разложившихся материалов и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхности зуба перед пломбированием.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания
- Применение с пациентом с тяжелейшей общей острой осторожности.
- Пациенты с недостаточностью.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременная женщина в целом.

11. Меры предосторожности
- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия и правила его для длительного использования.
- Пользователь несет ответственность за операторский технический обслуживание и постоянный осмотр изделия. Избегайте удара по изделию и не роняйте его.
- Если при падении или ударе изделие повреждено, прекратите работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю для определения возможности дальнейшего использования.
- Изделие поставляется в неразборном состоянии и должно быть стерилизовано перед первым и каждым повторным использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проводите проверку работоспособности на холостом ходу.
- Использование изделия производится в защитных медицинских перчатках.


12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)
Не было выявлено какой-либо побочной реакции или предсказуемых побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предполагаемыми клиническими применениями, указанными в эксплуатационной документации производителя.

13. Риски применения медицинского изделия
Группа применения риска: риск, связанный с повышенной сложностью эксплуатации, с соответствии с установленными требованиями. В результате ошибки пользователя, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. Риски, связанные с применением изделия, не выявлено новых рисков, ссылаемых существующих рисков, не приводящих к неприемлемому остатков на допустимом уровне. Риски в условиях нежелательных рисков в процессе проверки повторную оценку риска.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия
NIVO T100 - рабочий наконечник с 4 каналами, перистатический, генератор света, отдельный светодиод. Турбинный стоматологический наконечник оснащен системой подачи света и воды, обеспечивающей высокую скорость вращения и качественную обработку. Благодаря трем каналам для подачи воды и воздуха, система охлаждающей струей через три отверстия в передней части головки. Изношенные воздух отводится сбоку через вентиляционные отверстия в задней части головки. Для удаления инородных частиц в головке предусмотрена система фильтрации. Для освещения рабочей области в головке наконечника имеется. Данная модель оснащается светодиодом с генератором для освещения рабочей области.

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	139,33 (±1)0 x 15,50 (±1) x 12,70 (±1)
Масса нетто, г / масса брутто, г	Масса-нетто не более 109 Масса-брутто не более 200
Передаточное соотношение	1:1 (тип 2 по ГОСТ ISO 7785-1:2011)
Механизм фиксации бора	Кнопочный
Разрешенный инструмент	ISO 1797-1 Тип 3: диаметр 1,6 мм, длинна <21мм
Давление	Не более 0,03 мм
Усилие вхождения оправки из зажимного устройства	Не менее 22 Н
Усилие вытягивания	Не более 50 Н
Освещение рабочей области	Светодиод с генератором света
Кварцевая/керамическая оптика	6 (+4 -2) мм
Скорость вращения при холостом ходе	350,000-420,000 об/мин
Крутящий момент ротора	Не менее 0,05 Н*см (при 0,25 МПа)
Частота колебаний	От 4000 до 40000 Гц
Амплитуда	Не более 200мкм
Соединение со шлангом	4 канальное, ISO 9168, тип 2
Подача воды	50мл/мин (при 200 кПа)
Подача воздуха	>1,5 л/мин (при 200 кПа)
Канал охлаждения воды и воздуха	Независимые, 3/3
Обратный клапан	Есть
Фильтр крупных частиц	Есть
Уровень шума	Не более 68 дБ
Тип ротора	Открытый тип
Тип подшипников	Керамические
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Клуси из металлополимерной силиконовой резиновой смеси

15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке

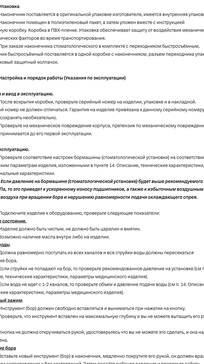

Пример: 25A01Y001 - Дата изготовления изделия 01 января 2025, модель Y, порядковый номер 001

16. Упаковка
- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя, имеется внутренняя упаковка.
- Наконечники помещены в полиэтиленовый пакет, с двусторонней защитой имеет с инструкцией
- картонную коробку. Коробка в ПВХ-пленке. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки.
- При замене наконечника в стоматологическом комплексе с переключением быстросъёмных, переходник быстросъёмной поставляется в сухой коробке с наконечником, разъем переходника упакован в полиэтиленовый мешок.

17. Настройка и порядок работы (Указания по эксплуатации)

Приемка и ввод в эксплуатацию.
- После вскрытия коробки, проверьте серийный номер на изделии, упаковке и в накладной.
- Серийный номер не должен отличаться. Гарантия на изделие привязана к данному серийному номеру. Коробку сохранить необязательно.
- Проверьте на механическое повреждение корпуса, пригодны ли механическому повреждению изделия применяется до его первой эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию.
1. Проверьте соответствие настроек борвашины (стоматологической установки) на соответствие техническим параметрам изделия, изложенным в пункте 14. Описание, технические характеристики, функциональная характеристика.

ВАЖНО! Если давление на борвашине (стоматологической установке) будет иным рекомендуемого «0,03 кгс/кв. п» при превышении рекомендуемого могут подшипники, а также и избыточном возможно потоки воздуха при давлении бора и нарушению равномерности подачи охлаждающего спрея.

2. Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели:

Внешнее состояние.
- Изделие должно быть чистым, не должно быть царапин и вмятин.
- Возможно наличие масла внутри либо на изделии.

Подача воды.
- Должна равномерно поступать из всех каналов и все струйки воды должны перекрываться на кончике бора.
- Если струйки не попадают на бор, то проверьте равномерность давления на установке (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).
- Если вода не идет с 1-2 каналов, то проверьте каналы подачи воды (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).

Кнопочный зажим.
- Инструмент (бор) должен свободно вставляться и извлекаться при нажатии на кнопку.
- Проверьте, что инструмент вставлен на максимальную глубину и бы не можете вытащить его рукой.

Кнопка
- Кнопка не должна спонтанно выходить, двигаться/застревать что вы не можете это сделать, и она надежно закреплена.

Вращение бора
- Должно быть равномерно, без биения, медленно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно без сопротивления и без застреваний. Затем подайте давление воздуха и проверьте работу наконечника. Обороты, без прерывания (вибрации). При давлении ниже рекомендованного скорость вращения резко падает может вибрировать.

Свет
- Светодиод (светодиодная лампа) начинает светить при срабатывании стоматологического оборотов, после чего светит равномерно, без прерывания (мерцаний). При давлении ниже рекомендованного светодиод работает нестабильно может гаснуть либо не светить.

3. Изделие готово к работе.
- Изделие в ваш, что только проверку рекомендуем проверь раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.


18. Способ применения.
1. Установка наконечника:
- Вставьте наконечник в соединительный разъем шланга совместимой борвашины (см. пункт 19 "Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями") и затяните гайку соединительного разъема шланга. Предварительно соединение наконечника с переходником (применимо для моделей с переходником в комплекте). Убедитесь, что наконечник надежно подсоединен к шлангу.
2. Отсоединение наконечника
- Открутите гайку соединительного разъема шланга и отсоедините наконечник от шланга.
3. Установка бора
- Нажмите кнопку зажима и удерживая ее, извлеките бор.

ВАЖНО! Извлечение инструмента (бора) допускается только после полной остановки вращения. В противном случае, стружка, а также частицы при соприкосновении, попадет в подшипники, что приведет к их преждевременному выходу из строя.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.
Конструкция, размеры и допуски соединения наконечника должны соответствовать требованиям ISO 3964. Корпус и фронтальная головка ISO 1797. Наконечник может использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует стандарту ISO 60601-1.
Изделие применяется совместно с борвашиной (стоматологической установкой), например:
Регистрационное удостоверение - ФСЗ 2009/04648 от 24.06.2009 г. Установка стоматологическая «Sigeo» с принадлежностями и средствами измерения, производитель «Foshan Sigeo Medical Equipment Co., Ltd», Building 2, No. 1, Chuangxin Yi Road, "Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

20. Требования к ремонту
Пользователь не должен самостоятельно производить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованному сервисному службу либо уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).
В первый раз, а также после каждого применения изделия необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.
Чистка
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае накопленной грязи в труднодоступных местах, используйте мягкую щетку для очистки.
Внимание!
- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечник под горячей водой.
- Не допускается дезинфекция в ультразвуковой ванне.
Смазка (уборка)
- Выбирайте инструмент из наконечника, обрежьте только наконечника сухой салфеткой для контроля за чистотой внутреннего канала.
- Подайте смазку из баллончика сильных наконечника и механизм фиксации инструмента (бора) в течение 1 секунды (сек.). Насадка должна быть с носиком диаметром между диаметра разрешенного инструмента.
- Возьмите наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку сильным нажатием со стороны подключения и уставки (бор) защищен, непрерывно в течение 2 секунд (сек.). В случае наличия грязи на салфетке - повторить.
- Подключить к установке и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдать с корпуса воздушным пистолетом.

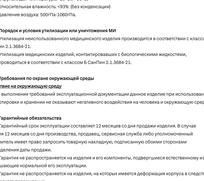

Внимание!
В случае попадания влаги либо краски на наконечнике во время его использования - чистку проводить сразу после окончания работы.

22. Стерилизация
- Стерилизация изделия в крафт-пакет и пропетиленуйлен наконечника в автоклаве типа В при температуре не более 134°С.
- Для стерилизации допускается автоклавы, соответствующие стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации хранения и транспортирования МИ
Условия эксплуатации:
- окружающая температура: +5 °С – +40 °С;
- относительная влажность: 20% - 80% (без конденсации)
- давление воздуха: 860 гПа-1060 гПа.

Условия транспортировки и хранения:
- окружающая температура: -20°С – +55°С;
- относительная влажность: <93% (без конденсации)
- давление воздуха: 500гПа-1060гПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ
Утилизация медицинских изделий медицинского изделия производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.
Утилизация медицинских изделий, контаминированных с биологическими жидкостями, должна проводиться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды
Воздействие на окружающую среду
Отсутствие вредного воздействия изделия на окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства
- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае отсутствия даты продажи в документе, подтверждающем покупку, гарантийный срок исчисляется с момента производства изделия.
- Гарантия не распространяется на изделия и его компоненты, подвергшиеся естественному износу, из-за несоблюдения нормальной эксплуатации.
- Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеется деформация корпуса в следствие механического повреждения.

27. Срок службы
Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, вида в эксплуатации должен быть в течение 3 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов
ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р МЭК 62366-1, ГОСТ Р ИСО 13233-1, СанПин 2.1.3684.