Инструкция по применению:
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T115



Редакция 1.1

1. Наименование и юридический адрес производителя
- Производитель:
Foshan Xunfeng Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Сюньфэн Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)
- Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Baimen Economic Cooperative Society Area, Tangtou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России
ИП Меньшин Никита Владимирович
ИНН 772599882308, ОГРНИП 320774600219763
Контакты для связи: почта info@nivo.ru.com
Телефон +7 (985) 631-72-79

3. Наименование медицинского изделия
Стоматологические наконечники NIVO
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T115

4. Комплектность поставки
- Наконечник стоматологический турбинный – 1 шт.
- Тестовый бор – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

5. Назначение по применению
Стоматологические наконечники NIVO предназначены для закрепления рекламных и полировальных инструментов и передачи им вращения с помощью приводов стоматологических работ.

6. Классификация медицинского изделия
Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **216740, 119690**
Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – **2а.**
- Потенциал защиты от проникновения влаги и пыли – **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные пользователи
Используется только квалифицированным медицинским персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и область применения
Условия применения: стоматологическая клиника, зуботехническая лаборатория, клиника и другие лечебно-профилактические учреждения.
Область применения: терапевтическая, ортопедическая и хирургическая стоматология.

9. Показания к применению
- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление разложившихся материалов и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхности зуба перед наложением коронок.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания
- Применение с пациентов с тяжелейшей острой сердечной сосудистой.
- Пациенты с недиагностированным.
- Пациенты с серьезно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременные женщины в целях.

11. Меры предосторожности
- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия и правила его безопасного использования.
- Пользователь несет ответственность за операторский навык и соответствие условиям эксплуатации с постоянной осмотр изделия. Избегайте удара о изделие и не роняйте его.
- Если при подаче воды в изделие воздух, прекратите работу и устраните причину.
- Перед использованием проверьте, что давление воздуха соответствует рабочему диапазону.
- Не используйте изделие при отсутствии подключения к источнику воздуха.
- Не используйте изделие, если оно повреждено, деформировано, имеет трещины, чрезмерно изношено или прекратило работу и обратитесь в продавцу либо уполномоченному представителю.
- Изделие поставляется в нестерильном состоянии и должно быть стерилизовано перед первым и каждым повторным использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проводите проверку работоспособности на холостом ходу.
- Использование изделия производится в защитных медицинских перчатках.


12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)
Не было выявлено какой-либо побочной реакции или предсказуемых побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предполагаемыми клиническими применениями, указанными в эксплуатационной документации производителя.

13. Риски применения медицинского изделия
Группа риска данного изделия: пациенты с повышенной склонностью к соответствии с установленными требованиями. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. Если возникновения риска или в случае возникновения новых рисков, а существующие оценки, которые ранее считались приемлемыми остаются на допустимом уровне. В случае появления новых рисков производитель проведет повторную оценку риска.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия
NIVO T115 – турбинный наконечник 4 канальный, поворотная часть, отдельный светодиод, четыре канала охлаждения. Турбинный стоматологический наконечник оснащен системой подачи смазочного воздуха, обеспечивающей длительную защиту внутренних инструментов (бора), а также комфортную подводка воды и воздуха, создающими охлаждающий спрей через четыре отверстия в передней части головки. Наконечник оснащен оптическим волокном для обеспечения качественного и удобного освещения рабочей области. Единой модели изготовлен полный комплект, включающий в себя: инструкцию по эксплуатации для ознакомления пользователя с правилами эксплуатации.

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	139,33 h 100 x 15,50 (+) 13,80 (-)
Масса нетто, г / масса брутто, г	Масса-нетто: не более 109 Масса-брутто: не более 200
Передаточное соотношение	1:1 (тип 1 по ГОСТ ISO 7785-1:2011).
Механизм фиксации бора	Кнопочный
Разрешенный инструмент	ISO 1797-1 Тип 3: диаметр 1,6 мм, длинна =21мм
Головка	Не более 0,03 кг
Усилие извлечения отрезка из корпуса турбины	Не менее 22 Н
Усилие вставления	Не более 50 Н
Освещение рабочей области	Светодиод с температурой света 4100-6 2 500 К
Взаимозаменяемая головка наконечника	Да
Скорость вращения при разрешенном давлении	350,000-400,000 об/мин
Крутящий момент потока	Не менее 0,05 Н*м (при 0,25 МПа)
Частота колебаний	От 4000 до 40000 Гц
Амплитуда	Не более 200мкм
Соединение со шлангом	4 канальное, ISO 9168, тип 2
Подача воды	50мл/мин (при 200 кПа)
Подача воздуха	>1,5 л/мин (при 200 кПа)
Каналы охлаждения воды и воздуха	4, смешанные
Оборотный клапан	Есть
Фильтр крупных частиц	Есть
Уровень шума	Не более 68 дБ
Тип упора	Открытый тип
Тип подшипников	Керамические
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Клуэл из металлической силиконовой резиновой смеси

15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке

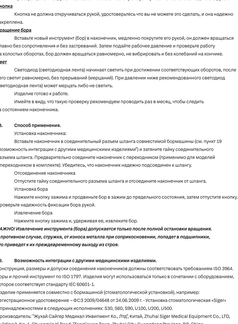

Пример: 2540174002 - Дата изготовления изделия 02 января 2025, модель 4, 2 порядковый номер 002.

16. Упаковка
- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя, имеется внутренняя упаковка.
- Наконечник помещен в полиэтиленовый пакет, а затем уложен вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка в ПВХ-пленке. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования.
- При заказе наконечника в комплектации 4 комплекте с переходником быстросъемным, переходник быстросъемный поставляется в целой коробке с наконечником, разными переходника упакован в отдельных коробках.

17. Настройка и порядок работы (Указания по эксплуатации)

Приемка и ввод в эксплуатацию.
1. После вскрытия коробки, проверьте серийный номер на изделии, упаковке и в накладной. Серийный номер на должен отличаться. Гарантия на изделие привязана к данному серийному номеру. Коробку следует незамедлительно.
2. Проверьте на механическое повреждение корпуса, протестируйте его механическому повреждению изделия произведите до его первой эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию.
1. Проверьте соответствие настроек барокамеры (стоматологической установки) на соответствие технических параметров изделия, изложенным в пункте 14. Описание, технические характеристики, функциональные характеристики.
ВАЖНО! Если давление на барокамере (стоматологической установке) будет выше рекомендуемого +0,01кгс/кв. см по прямому и обратному клапану подключения, а также к избыточным влажности потоками воздуха при давлении бора и нарушению равномерности подачи охлаждающего спрея.

2. Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели:
Внешнее состояние.
- Изделие должно быть чистым, не должно быть царапин и вмятин.
- Возможно наличие масла внутри либо на изделии.

Подача воды.
- Должна равномерно поступать из всех каналов и все струйки воды должны пересекаться на кончике бора.
- Если струйки не попадают на бор, то проверьте рекомендованное давление на установке (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).
- Если вода не идет с 1-2 каналов, то проверьте обмен и давление подачи воды (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).

Контроль давления.
- Инструмент (бор) должен свободно вставляться и извлекаться при нажатии на кнопку.
- Проверьте, что инструмент вставлен на максимальную глубину и бы не можете вытащить его рукой.

Кнопка.
- Кнопка не должна спонтанно работать, срабатывать что бы не можете это сделать, и она надежно закреплена.

Вращение бора.
- Включите новый инструмент (бор) в наконечник, надежно помогите его рукой, он должен вращаться плавно без сопротивления и без застревания. Затем подайте рабочее давление и проверьте работу инструмента. Обороты должны соответствовать рекомендованным, не вибрировать и не колебаний на корпусе.


Свет.
- Светодиод (встроенная лампа) начинает светить при достижении соответствующего оборота, после чего свет равномерно, без прерывистой (мерцающей). При давлении ниже рекомендованного светодиод (встроенная лампа) может мерцать либо не светить.
3. Изделие готово к работе.
- Имейте в виду, что такую проверку рекомендуем проводить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.
1. Установка наконечника.
- Вставьте наконечник в соединительный разъем шланга совместимого барокамеры (см. пункт 19 "Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями") и затяните гайку соединительного разъема шланга. Предварительно совершите наконечник с переходником (применяется для моделей с переходником в комплекте). Убедитесь, что наконечник подсоединен к шлангу.
2. Отсоединение наконечника.
- Открутите гайку соединительного разъема шланга и отсоедините наконечник от шланга.
3. Установка бора
- Нажмите кнопку зажима и продвиньте бор в зажим до упора, затем отпустите кнопку. Проверьте надежность фиксации бора рукой.
4. Извлечение бора
- Нажмите кнопку зажима и, удерживая ее, извлеките бор.
ВАЖНО! Извлечение инструмента (бора) допускается только после полной остановки вращения. В противном случае, струями, из-за инерции, бора может произойти повреждение, попадет в пациентам, что приведет к их кровотечению, выходу из строя.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.
Конструкция, размеры и допуски соединения наконечника должны соответствовать требованиям ISO 3964, Form 4 (прямой наконечник) по ISO 1797. Наконечник может использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует стандарту ISO 60601-1.
Изделие совместимо с стоматологической установкой (стоматологический установкой), например: Регистрационное удостоверение - ФСЗ 2009/04648 от 24.06.2009 г. Установка стоматологическая «Sigeo» с принадлежностями в следующем исполнении: S30, S80, S90, U100, U200, U300.
Производитель: Foshan Sigeo Medical Equipment Co., Ltd. Китай, Zhuhai Sigeo Medical Equipment Co., LTD, Building 2, No. 1, Chuangxin Yi Road, "Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

20. Требования к ремонту
Пользователь не должен самостоятельно производить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованному сервисному службу либо уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).
В первый раз, а также после каждого применения изделия необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.
Чистка
- После окончания работы очистите пульвер отсоедините изделие.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае наклеенной грязи и трудноудаляемых пятен, используйте мягкую щетку для очистки.
Внимание!
- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечник под струей воды.
- Не допускается дезинфекция в ультразвуковой ванне.
Смазка (уходом)
- Выпадите инструмент из наконечника, обильно полову наконечника сухой салфеткой для контроля за чистотой внутреннего механизма.
- Подайте смазку из баллончика сильным нажатием в канал/каналы физическим инструмента (бора) в течение 1 секунды (сек.). Насадка должна быть с носиком диаметром меньше диаметра разрешенного инструмента.
- Вскажите наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку сильным нажатием со стороны подключения и установки (бор надежно) непрерывно в течение 2 секунд (сек.). В случае наличия грязи на салфетке - повторить.
- Подключить к установке и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сушу с корпуса вращением пистолетом.

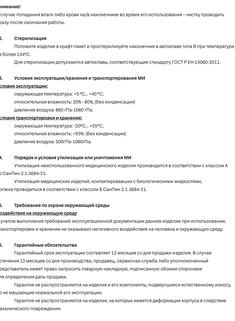

Внимание!
В случае попадания влаги либо краев мыла наконечников во время его использования - чистку проводить сразу после окончания работы.

22. Стерилизация
- Положите изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклаве типа B при температуре не более 134°C.
- Для стерилизации допускается автоклавы, соответствующие стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации хранения и транспортирования Мп
Условия эксплуатации:
- окружающая температура: +5 °C ... +40 °C;
- относительная влажность: 20% - 80% (без конденсации)
- давление воздуха: 860 гПа - 1060 гПа.

Условия транспортирования и хранения:
- окружающая температура: от -20°C ... +50°C;
- относительная влажность: <93%; (без конденсации)
- давление воздуха: 500гПа-1060гПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения Мп
Утилизация медицинских изделий, контаминированных с биологическими жидкостями, должна проводиться в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды
Воздействие на окружающую среду
Отсутствие негативное воздействие составляет 13 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 12 месяцев со дня производства, продавец, сервисная служба либо уполномоченный представитель имеет право запросить товарную накладную, подтверждающие обратное дату производства изделия.
- Отсутствие негативного воздействия на окружающую среду, подвергшееся естественному износу, и не нарушающее нормальной его эксплуатации.
- Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеется деформация корпуса в следствие механического повреждения.

27. Срок службы
Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, вида в эксплуатации должен быть в течение 1 лет от даты производства.

28. Перечень применяемых стандартов
ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-3, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р МЭК 61366-1, ГОСТ Р ИСО 13233-1, СанПин 2.1.3684.