Инструкция по применению:
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T135



Редакция 1.1

1. Наименование и юридический адрес производителя

Производитель:
Foshan Xunfeng Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Сюньфэн Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)
Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Bainan Economic Cooperative Society Area, Tangtou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России

ИП Меньшин Никита Владимирович
ОГРНИП 319784900061068, ОГРНИП 320774600219763
Контакты для связи: почта info@nivo.ru.com
Телефон +7 (985) 610 - 73 - 292

3. Наименование медицинского изделия

Наименование медицинского изделия: **NIVO**
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T135

4. Комплектность поставки

- Наконечник стоматологический турбинный – 1 шт.
- Тестовый бор – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

5. Назначение по применению

Стоматологические наконечники NIVO предназначены для закрепления рабочих и полирующих инструментов и передачи им вращения от турбинного привода применяемой стоматологической работе.

6. Классификация медицинского изделия

Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **216740, 119690**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий – **2а.**

- Степени защиты от проникновения влаги и пыли - **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные пользователи

Используется только квалифицированным медицинским персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и область применения

Условия применения: стоматологические кабинеты, зуботехнические лаборатории, клиники и другие лечебно-профилактические учреждения.
Область применения: терапевтическая, ортопедическая и хирургическая стоматология.

9. Показания к применению:

- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление размягченного материала и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхности зуба под установку вкладок.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания

- Применение с пациентом с генофобией требует особой осторожности.
- Пациенты с аллергостигмарами.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременные женщины в 1м триместре.

11. Меры предосторожности

- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия и следовать его для длительного срока использования.
- Пользователь несет ответственность за определение правильного способа использования оборудования с постоянной оценкой ситуации. Избегайте угроз изделию и не ронять его.
- В случае падения или другого повреждения, прекратите работу и не эксплуатируйте в ремонтируйте работу оборудования представителем для определения возможности дальнейшей эксплуатации.
- Не используйте изделие в присутствии легковоспламеняющихся средств, - наркозных, - наркозных препаратов работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю.
- Не используйте изделие в присутствии легковоспламеняющихся средств, - наркозных, - наркозных препаратов и каждым поставщиком изделия.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проведите проверку работоспособности на изделия образца.

Использование изделия производится в защитных медицинских перчатках.

12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)

Не было выявлено какой-либо нежелательных последствий или побочных побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предусмотренными клиническими применениями, указанными в эксплуатационной документации производителя.

13. Риски применения медицинского изделия

Группа риска данного изделия: пользователь соблюдающий соблюдает строгий риск в соответствии с установленными требованиями. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. Если внедрение в процесс риска не возможно риска и возможно новых рисков, с существующими средствами и предложенные описанного остается на допустимом уровне. В случае появления новых рисков, ранее не предусмотренных просьбу повторную оценку риска.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия

NIVO T135. Турбинный наконечник 4-канальный под 45 градусов, температура света, без воды, 3 канала охлаждения, оптоволоконный. Турбинный стоматологический наконечник оснащен системой подачи смазки воздуха, обеспечивающая высокую скорость вращения инструмента (бора), а также каналами для подачи воды и воздуха, создающими охлаждающий спрей через три отверстия в передней части головки. Изначительного вращения отдачи при нажатии бора с максимальным диаметром 2,35 мм предотвратить нажатии кнопки. Данная модель оснащена внутренним генератором постоянного тока для питания осветительной системы, работающей от

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	139,51 (+10 х 15,90 (+1х 13,60 (+1)
Масса нетто, г / масса брутто, г	Масса нетто: не более 100г Масса брутто: не более 200г
Передаточное соотношение	1:1 (тип 1) ГОСТ ISO 7785-1:2011).
Механизм фиксации бора	Кнопочный
Разрешенный интервал	ISO 1797-1 Тип 3: диаметр 1,6 мм, длина +21мм
Биение	Не более 0,03 мм
Усилие извлечения отрезка из зажимного устройства	Не менее 22 Н
Усилие вставления	Не более 50 Н
Освещение рабочей области	Светодиод 1, температура света
Разрешенная давление пневмопривода	0.2-0.25 МПа
Скорость вращения при разрешенном давлении	300,000-430,000 об/мин
Круглый конус ротора	Не менее 0,05 м*см (при 0,25 MHz)
Частота колебаний	От 4000 до 40000 Гц
Амплитуда	Не более 300мкм
Соединение со шлангом	4-канальное, ISO 9168, тип 2
Подача воды	50мл/мин (при 200 кПа)
Подача воздуха	>1,5 л/мин (при 200 кПа)
Каналы охлаждения воды и воздуха	3 канала воды, воздух загрушен
Обратный клапан	Есть
Муфта крепления	Есть
Уровень шума	Не более 68 дБ
Тип ротора	Открытый тип
Тип подшипников	Керамические
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Корпус из металлической композитной резиновой смазки

15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке



Пример: 250417.001 - Дата изготовления изделия 17 января 2025, модель T, порядковый номер 001

16. Упаковка

- Наконечник поставляется в одноразовой упаковке изготовителя, имеется внутренняя упаковка.
- Наконечник помещен в полиэтиленовый пакет, а затем уложен вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка в ПВХ-пленке, обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки.
- При заказе наконечника стоматологического в комплекте с переходником быстросъемным, переходник быстросъемный поставляется в одной коробке с наконечником, разные переходника упакован в пластиковый защитный колпачок.

17. Настройка и порядок работы (Указания по эксплуатации)

Приемка и ввод в эксплуатацию.

1. После вскрытия изделия, проверьте серийный номер на изделии, указанное в накладной. Серийный номер на данном изделии должен совпадать. Убедитесь в комплектности изделия и проверьте работу коробку сохранность.
2. Проверьте на механическое повреждение корпуса, прилегание по механическое повреждение изделия принимается до его первой эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию.

1. Проверьте соответствие настроек безопасных стоматологической установки на соответствие. Технические параметры подключения, изложенные в пункте 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия.

ВАЖНО! Если давление на изделие (стоматологической установки) будет выше рекомендуемого -0,025 кПа, то это приведет к ускоренному износу подшипников, а также к избыточной вращающем потоке воздуха при вращении бора и нарушению равномерности подачи охлаждающего спрея.

2. Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели:

Внешнее состояние.

Изделие должно быть чистым, не должно быть царапин и вмятин.
Вспомогательные изделия могут быть не изделия.

Подача воды:

Должна равномерно поступать из всех каналов и все струйки воды должны перекрываться на конечном боре.

- Если струйки не попадают на бор, то проверьте рекомендованное давление на установке (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).

Если вода не идет с 1-2 каналов, то проверьте обилие и давление подачи воды (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).

Кнопочный зажим

Инструмент (бор) должен свободно вставляться и извлекаться при нажатии на кнопку.
Проверьте, что инструмент вставлен на максимально глубину и вы не можете вставить его ручкой.

Кнопка

Кнопка не должна откручиваться рукой, удостоверьтесь что вы не можете это сделать, и она надежно закреплена.

Вращение бора

Вставьте новый инструмент (бор) в наконечник, медленно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно без сопротивления, без заеданий. Затем подайте рабочее давление и проверьте работу на колотых сборов, бор должен вращаться равномерно, не вибрировать и без колебаний на конечке.

Свет

Светодиод (светодиодная лента) начинает светить при достижении соответствующих оборотов, после чего свет равномерно, без прерываний (мерцаний). При давлении ниже рекомендованного светодиод (светодиодная лента) может мерцать или светить.

Изделие готово к работе.

Изменяя в ход, что такую проверку рекомендуем проводить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.

1. Установка наконечника:
Вставьте наконечник в соединительный разъем шланга совместимой арбалетными (см. пункт 19 "Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями") и затяните гайку соединительного шланга вручную. Предварительно проверьте совпадение с переходником (применяется для изделий с переходником в комплекте). Убедитесь, что наконечник надежно подсоединен к шлангу.
2. Отсоединение наконечника:
Отпустите гайку соединительного разъема шланга и отсоедините наконечник от шланга.
3. Установка бора
Нажмите кнопку зажима и продвиньте бор в зажим до предельного состояния, затем отпустите кнопку. Проверьте надежность фиксации бора рукой.
4. Извлечение бора
Нажмите кнопку зажима и извлеките бор.

ВАЖНО! Используйте инструменты (боры) с диаметром только после полной остановки вращения. В противном случае, струнка, от износа металла при соприкосновении, попадет в подшипники, что приведет к их преждевременному выходу из строя.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.

Конструкция, размеры и другие соединения наконечника должны соответствовать требованиям ISO 3964. Боры и прочий инструмент по ISO 1797: изделие могут использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует стандартам ISO 9168/3-1.

Изделие применяется совместимо с боровыми (стоматологической установкой, напримир):
Регистрационное удостоверение – ФСЗ 2009/04648 от 24.06.2009 г. - Стоматологическая установка «Сирен» с принадлежностями и оборудованием (КЗ, S80, S80, U100, U200, U300)
Производитель: "Жуцай Сайпер Медикал Инвестмент Ко., Лтд", Китай, Zhuhai Siger Medical Equipment Co., LTD, Building 2, No. 1, Chuangxin 1st Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

20. Требования к ремонту

Пользователь не должен самостоятельно производить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованному сервисному центру или уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).

В первый раз и также после каждого применения изделия необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.

Чистка

После окончания работы наконечник сразуже отсоедините изделие.
Протрите изделие влажной мягкой салфеткой с небольшим количеством спирта. В случае наколенной грязи в труднодоступных местах, используйте мягкую щетку для очистки.

Внимание!

- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечник под краном воды.
- Не допускайте давления распылителя.

Смазка (ручная)

Выбрайте инструмент из наконечника, обеспечьте полную наконечника сухой салфеткой для контроля за чистотой внутреннего механизма.

- Подайте смазку из баллончика сильными нажатиями в механизм инструмента (бора).
- В течение 1 секунды (сек. 1). Подключите быть 1 - наконечник диаметром меньше диаметра рекомендуемого инструмента.

Вставьте наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку короткими нажатиями со стопора подключения к установке (бор мешает) непрерывно в течение 2 секунд (сек. 2). В случае наличии грязи на салфетке - повторить.

- Подключить к установке и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса воздушным пистолетом.

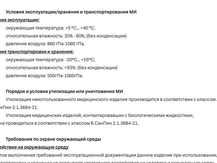


Рис.1 Рис.2

Внимание!

В случае попадания влаги капли воды наконечника на внутрь в механизм его использования - чистку проводить сразу после окончания работы.

22. Стерилизация

Полностью изделие в кафф-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклаве типа B при температуре не более 134°C.

Стерилизацию допускается автоклавы, соответствующие стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации/хранения и транспортирования МИ

Условия эксплуатации:

- окружающая температура: +5 °C... +40 °C;
- относительная влажность: 20% - 80% (без конденсации)
- давление воздуха: 860 гПа-1060 гПа.

Условия транспортирования и хранения:

окружающая температура: -20°C...+55°C;
относительная влажность: <93% (без конденсации)
давление воздуха: 500гПа-1060гПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ

Утилизация неиспользованного медицинского изделия производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.

Утилизация медицинских изделий, контактировавших с биологическими жидкостями, должна производиться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды

Воздействие на окружающую среду

С учетом выполнения требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировании и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 12 месяцев со дня производства, продавец, сервисная служба либо уполномоченный представитель имеет право запросить паспорт изделия, подтверждающих обычаем сторонами для определения срока продажи.

Гарантия распространяется на изделия и его компоненты, подразумевает естественную износу, но не ненадлежащим нормальной его эксплуатации.

Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеется рекламная информация в следствие механического повреждения.

27. Срок службы

Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, ввода в эксплуатацию должен быть в течение 3 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов

ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р ЕН 13060-2011, ГОСТ Р ИСО 13323-1, СанПин 2.1.3684.