
Инструкция по применению:
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T211

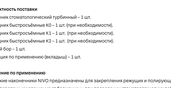

Редакция 1.1

1. Наименование и изготовитель адрес производителя

- Производитель:
Foshan Kunteng Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Сюнтэн Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)
- Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Baimei Economic Cooperative Society Area, Tangtou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и изготовитель адрес уполномоченного представителя в России

ИП Меньшин Никита Владимирович
ИНН 771599868396, ОГРНИП 320774600197903
Контакты для связи: nora_info@vivo.mail.ru
Телефон +7 (985) 620 - 72 - 75

3. Наименование медицинского изделия

Стоматологическое наконечник NIVO
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологический турбинный NIVO T211

4. Комплектность поставки

- Наконечник стоматологический турбинный – 1 шт.
- Переходник быстросъемный K01 – 1 шт. (при необходимости).
- Переходник быстросъемный K3 – 1 шт. (при необходимости).
- Переходник быстросъемный K2 – 1 шт. (при необходимости).
- Тестовый бор – 1 шт.
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

5. Назначение по применению

Стоматологические наконечники NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращения от бормашины при проведении стоматологических работ.

6. Классификация медицинского изделия

- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **ГМН. 118890**
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствие с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **2а**

*По степени защиты от проникновения влаги и пыли - **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.*

7. Потенциальные пользователи

Используется только квалифицированными медицинским персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и область применения

Условия применения: стоматологические кабинеты, зуботехнические лаборатории, клиники и другие лечебно-профилактические учреждения.

Область применения: стоматологическая, ортопедическая и хирургическая стоматология.

9. Показания к применению:

- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление расплавленных материалов и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхности зубов под штамповку коронок.
- Полировка зубов с реставрационными поверхностей.

10. Противопоказания

- Применение с пациентов с гемофилией требует особой осторожности.
- Пациенты с кардиостимуляторами.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременные женщины и дети.

11. Меры предосторожности

- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия и его работу для дальнейшего использования.
- Пользователь несет ответственность за определение контроль, техническое обслуживание и безопасность своего изделия, а также выбор изделия по изделию и не ремейк его.
- В случае падения или ударов изделия, прекратите работу и не обратитесь к продаже, либо купили в изготовителя. Не используйте поврежденное изделие во избежание эксплуатации.
- В случае нарушения функционирования изделия во внешнее оператора, - немедленно прекратите работу и обратитесь к продаже либо уполномоченному представителю.
- Изделие поставляется в нестерильном состоянии и должно быть стерилизовано перед первым и каждым повторным использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проведите проверку работоспособности на холостом оборотах.
- Использование изделия производится в защитных медицинских перчатках.

12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)

На было известно нами побочных эффектов, связанных или предсказуемых побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предполагаемыми клиническими применениями, описанными в эксплуатационной инструкции производителя.

13. Риски применения медицинского изделия

Группа управления риском проанализировала основной контроль риска в соответствии с установленным требованием. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. После внедрения мер контроля риска, а также из-за низкого новых рисков, с существующие опасности и предварительно опасности остатка на допустимом уровне. В ручные появления новых рисков и будущей информации по производственному опыту.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия

NIVO T211: турбинный наконечник под 4-х струйное на передача, фиброоптика, 3 канала охлаждения. Турбинный стоматологический наконечник с оптической системой подачи света воздуха, обеспечивающий высокую скорость вращения инструмента (бора), а также качественная для подачи воды и воздуха, создающими охлаждающий спрей через три спектра в передней части головки. Износнойвая воздух отводится сферы через форсунки, находящиеся в центре бормашины. В данной модели внутренний механизм фиксации бора с постоянством диаметром 1,6 мм посредством нажатия кнопки. Свет расположен прям передачи источника света от передающих через оптоволоконный волокно в зону препарирования.

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	121,80×110 x 16,40 (1) x 14,00×0 (1)
Масса нетто, г / масса брутто, г	Масса нетто не более 130г Масса брутто не более 200г
Передаточное соотношение	1:1 (от 1 до 1:5) ISO 7785-1: 2011 (1)
Механизм фиксации бора	Кнопочный
Расходуемый инструмент	ISO 1797-1 Тип 3: диаметр 1,6 мм, длинна <21мм
Биение	Не более 0,03 мм
Уклон наконечника спрямо из зажимного устройства	Не менее 22 м
Уклон вставления	Не более 50 Н
Осевыеьное рабочий момент	Фиброоптика, не менее 7000 Лк
Использованная давление пневмоагрегата	2.0-2.5 (кГ/))
Скорость вращения при разрешенном давлении	350,000-400,000 об/мин
Крутящий момент потока	Не менее 0,05 кГ•см (при 0,25 Мпа)
Частота колебаний	От 4000 до 40000 Гц
Амплитуда	На более 200мкм
Соединение со шлангом	Быстросъемный переходник
Подача воздух	Объем/мин (при 200 кПа)
Подача воздуха	>1,5 л/мин (при 200 кПа)
Каналы охлаждения воды и воздуха	3 канала, только вода
Обратный клапан	Нет
Фильтр крупных частиц	Нет
Уровень шума	Не более 68 дБ
Тип потока	Открытый тип
Тип подшипников	Керамические
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Корпус из металлической сплавной резиновой смеси

15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке



Расшифровка серийного номера XXXXXXXXX 03.03.03.03.1 2 3 4 5	Кодирование: 1. Последние две цифры года. 2. Корреспондентный месяц*. 3. Число месяца. 4. Код завода: 03. 5. Порядковый номер последовательность производства: 001,002,...	Январь – A, Февраль – B, Март – C, Апрель – D, Май – E, Июнь – F,
		Июль – G, Август – H, Сентябрь – I, Октябрь – J, Ноябрь – K, Декабрь – L

Пример: 25A0170001 - *Дата изготовления изделия 01 января 2025, модель 3, порядковый номер 001*

16. Упаковка

- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя, имеется внутренняя упаковка.
- Наконечник поставляется в полупрозрачной пакет, а затем уложен вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка в ПВХ-пленке. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов в ходе транспортировки.

При хранении наконечника стоматологического в комплекте с переходником быстросъемным, переходник 12 испытаний наконечник в одной коробке с наконечником, разовая переходника упакован в пластиковый защитный колпачок.

17. Настройка и порядок работы (подготовка к эксплуатации)

Приемка и ввода в эксплуатацию.

1. После вскрытия коробки, проверьте серийный номер на изделие, упаковке и в накладной. Серийный номер на должен отличаться. Гарантия на изделие гарантия с серийным номером коробку коробки наконечника.
2. Проверьте на механическое повреждение корпуса, пригодна по механическому повреждению изделие принимается до его первой эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию.

1. Проверьте соответствие настроек бормашины (стоматологической установки) на соответствие техническим параметрам изделия, изложенным в пункте 14. Описание, технические характеристики, функциональные характеристики.

ВНИМАНИЕ! Если давление на бормашине (стоматологической установке) будет выше рекомендованного +0,025 кгс/кв, то это приведет к преждевременному подшипников, а также к потоки воздушного потоки воздуха при давлении бора и нарушению равномерности подачи охлаждающего спрея.

2. Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели:

Внешнее состояние.

Изделие должно быть чистым, не должно быть царапин и вмятин.

Возможно наличие масла внутри паз изделия.

Подача воды.

Должна равномерно поступать из всех каналов и все струйки воды должны пересекаться на конусе бора.

Если струйки не попадают на бор, то проверьте рекомендованное давление на установке (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).

Если вода не идет с 1-2 каналов, то проверьте объем и давление подачи воды (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).

Кнопочный зажим

Инструмент (бор) должен свободно вставляться в выключенном при нажатии на кнопку.

Проверьте, что инструмент вставляется на максимальную глубину и вы не можете вытащить его рукой.

Уклона

Кнопка на должна открываться рукой, удостоверьтесь что вы не можете это сделать, и она надежно закреплена.

Внешнего бора

Вставьте новый инструмент (бор) в наконечник, медленно поверху его рукой, он должен вращаться плавно без сопротивления и без застревания. Запах подачу рабочих давление и проверьте работу на холостом обороте, бор должен вращаться равномерно, не избежать от вибрации и посторонних звуков.

Свет

Фиброоптикой проверьте свет от переходника. Светопсила определяется яркости света на переходнике.

Изделие готово к работе.

Имейте в виду, что перед проверкой проверьте работу в масло, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.

1. Установка наконечника.

Вставьте наконечник в соединительный разъем шланга совместимой бормашины (см. пункт 19 "Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями") и затяните гайку соединительного разъема шланга. Предварительно совершите наконечник с переходником (приемником) для моделей с переходником в комплекте. Убедитесь, что наконечник надежно подсоединен к шлангу.

2. Отсоединение наконечника.

Отпустите гайку соединительного разъема шланга и отсоедините наконечник от шланга.

3. Установка бора.

Нажмите кнопку зажима в продавлена бор в канал до предельного состояния, затем отпустите кнопку. Проверьте надежность фиксации бора.

4. Извлечение бора.

Нажмите кнопку зажима и, удерживая ее, извлеките бор.

ВАЖНО! Извлечение инструмента (бора) допускается только после полной остановки вращения. В противном случае, струйка, от износа металла при соприкосновении, попадет в подшипники, что приведет их к преждевременному выходу из строя.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.

Конструкция, размеры и рабочие соединение наконечников должны соответствовать требованиям ISO 3964. Корпус и почти изготовлен по ISO 1797. Изделие могут использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует стандарту IEC 60601-1.

Изделие применяется совместно с бормашиной (стоматологической установкой), например: Ремонтировать производителем – ФСЗ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ от 24.06.2009 г - Установка стоматологическая «Гедиз» с принадлежностями в упаковке исполнения: S30, S60, S90, U100, U200, U500, Производитель: "Жуцай Сайлинь Медикал Инвестмент Ко., Лтд" Китай, Zhu'cai Sign Medical Equipment Co., LTD, Building 2, No. 1, Chuangxin Yi Road, Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

20. Требования к ремонту

Пользователь не должен самостоятельно производить ремонт изделия. Обратитесь к продавцу, авторизованному сервисному центру либо уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (мытью очистке, дезинфекции и смазке).

В первый раз, а также после каждого применения изделия необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.

Чистка

- После окончания работы чистыми руками отсоедините изделие.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае наличием грязи в труднодоступных местах, используйте мягкую щетку для очистки.

Внимание!

- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечник под струей воды.
- Не допускается дезинфекция в ультразвуковой ванне.

Смазка (уход)

Выполнив инструмент из наконечника, обверните полову наконечника сухой салфеткой для контроля за чистотой внутреннего механизма.

Подайте смазку в бесплатно сильным нажатием в механизм фиксации инструмента (бора) в течение 1 секунды (см. 2). Насадка должна быть с носиком диаметром меньше диаметра разрабочего инструмента.

Возьмите наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку сильным нажатием со спрея подключите к установке (бор извлечен) непрерывно в течение 3 секунд (рис.2). В случае наличия грязи на салфетке - повторить.

Подключите к установке и включите на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса воздушным потоком.



Внимание!

В случае попадания влаги либо крови мыл наконечников во время его использования - чистку проводить сразу после окончания работы.

22. Стерилизация

Положите изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклаве типа В при температуре не более 134°С.

Для стерилизации допускаются автоклавы, соответствующие стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации,хранения и транспортирования МИ

Условия эксплуатации:

- окружающая температура: +5 °С... +40 °С;
- относительная влажность: 20% - 80%, (без конденсации)
- давление воздуха: 86 кПа-106 кПа.

Условия транспортирования и хранения:

- окружающая температура: -20°С... +50°С;
- относительная влажность: <93% (без конденсации)
- давление воздуха: 500 гПа-1060 гПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ

Утилизация неисправных(ого) медицинского изделия производится в соответствии с классом А СанПин 3.1.3684-21.

Утилизация медицинских изделий, контактировавших с биологическими жидкостями, должна проводиться в соответствии с классом Б СанПин 3.1.3684-21.

25. Требования по сервисному среду обслуживанию

Воздействие на окружающую среду

С учетом заключенные требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировании и хранении не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае отсутствия с письма со дня приемки гарантийных, подарка, сервисная служба либо уполномоченный представитель имеет право запросить товарную накладную, подписанную обеими сторонами или документ, подтверждающий.
- Гарантия не распространяется на изделия и его компоненты, подвергшиеся естественному износу, но не ограничивающиеся ими.
- Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеется деформация корпуса в следствие механического повреждения.

27. Срок службы

Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, вида в эксплуатацию должен быть в течение 3 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов

ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р ИСО 10993-1, СанПин 2.1.3684.