Инструкция по применению:
Наконечник стоматологический прямой NIVO S201-45



Редакция 1.0

1. Наименование и юридический адрес производителя:
- Производитель:
Foshan Kunteng Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Сюньтэн Медикал Текнолоджи Ко, Лтд.)
- Место производства:
No.1, 6th Floor, Block C, Bainan Economic Cooperative Society Area, Tanghou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России
ИП Мещалкин Никита Владимирович
ИНН 771595880368, ОГРНИП 320774600197903
Контакты для связи: почта: info@nivo.msk.ru ,
Телефон +7 (985) 631 - 73 - 72

3. Наименование медицинского изделия
Стоматологические наконечники NIVO
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологический прямой NIVO S201-45

4. Комплектность поставки
- Наконечник стоматологический прямой – 1 шт.
- Наконечник стоматологический прямой NIVO M100 - 1 шт. (при необходимости).
- Наконечник стоматологический прямой NIVO M150 - 1 шт. (при необходимости).
- Наконечник стоматологический прямой NIVO M200 - 1 шт. (при необходимости).
- Наконечник стоматологический прямой NIVO M300 - 1 шт. (при необходимости).
- Инструкция по применению/обслуживанию – 1 шт.

5. Назначение по применению
Стоматологические наконечники NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращения от бормашины при проведении стоматологических операций.

6. Классификация медицинского изделия
- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **218740, 113690**
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **2Б**
- По степени защиты от проникновения влаги и пыли - **IPX0** - не имеет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные пользователи
Используется только квалифицированными медицинскими персоналом для стоматологических операций.

8. Условия применения и область применения
- **Условия применения:** стоматологические кабинеты, хирургические кабинеты, лаборатории, клиники и другие лечебно-профилактические учреждения.
- **Область применения:** терапевтическая, ортопедическая и хирургическая стоматология.

9. Показания к применению
- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление расплавленных материалов и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхности зубов под установку коронок.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания
- Пациенты с тяжелой степенью острой соматической патологии.
- Пациенты с кардиостимуляторами.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременные женщины и дети.

11. Меры предосторожности
- Перед началом использования ознакомиться внимательно с инструкцией по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия, а также правила его эксплуатации и обслуживания.
- Пользователь несет ответственность за операционный контроль, техническое обслуживание и постоянный осмотр изделия. Избегайте падения изделия и ударов по нему.
- В случае падения или удара изделия, прекратите работу и не обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю производителя для проведения дальнейшей эксплуатации.
- В случае нарушения функционирования изделия по мнению оператора, - немедленно прекратите работу и обратитесь в продавцу либо уполномоченному представителю.
- Изделие поставляется в нестерильном состоянии и должно быть стерилизовано перед первым и каждым последующим использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проводите проверку работоспособности на холостых оборотах.
- Использование изделия производится в защитных медицинских перчатках.


12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)
Нет данных о возможных нежелательных реакциях, кроме индивидуальных побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предполагаемыми клиническими применениями, указанными в эксплуатационной документации производителя.

13. Риски применения медицинского изделия
Группа управления риском организационно-совокупный остаточный риск в соответствии с установленными требованиями. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. Преимущества изделия перевешивают любые возможные новых рисков, а существующие опасности и предварительное опасности остаются на допустимом уровне. В случае появления новых рисков в будущем потребуется провести повторную оценку риска.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия
NIVO S201-45 Медицинский наконечник 1:1, внешнее скольжение, без света, для боров 4мм, прямая рукоять. Прямой стоматологический наконечник предназначен для передачи вращения от вращающегося вала на инструмент через систему механизма передачи энергии (бор) во время работы в пределах эксплуатации 1:1.
соединяется с микромотором посредством стандартного соединения ISO 3964. Основные внешние каналы для подачи воздуха. Отличительные черты: Внешнее скольжение, Без света, Диаметр рукоятки (Ød) с диаметром постоянна 2.35 мм и длиной 45 мм посредством зажима на корпусе. Модель без света.

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	140,00 х 100 х 18,80 (1 х 19,80 (1:1)
Масса чего, г / масса брутто, г	Масса чего: не более 120г Масса брутто: не более 200г
Передаточное соотношение	1:1 (1н1 2 Н) ГОСТ ISO 7785-1: 2011(1).
Механизм фиксации бора	С механическим зажимом
Разрешенный инструмент	ISO-1797-1, тип 1, диаметр бора 2.35 мм
Биение	не более 0,08 мм
Усилие извлечения оправки из зажимного устройства	Не менее 45 Н
Освещение рабочей области	Без света
Скорость вращения	> 40000 об/мин
Крутящий момент	Не менее 2 Н*см
Назначение	По ISO 3964
Уровень шума	Не превышает 70 дБА
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Клуч-ся металлизированной силиконовой резиновой смесью

15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке

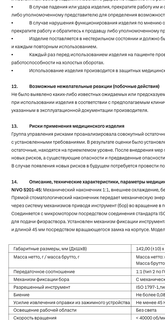

Пример: 250417001 - дата изготовления изделия 17 января 2025, модель 1, порядковый номер 001

16. Упаковка
- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя. Наконечники помещены в полиэтиленовый пакет, а затем уложены вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка в ПВХ-пленке. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки.
- Пневмодвигатели поставляется в оригинальной упаковке. Пневмодвигатель стоматологической помещен в полиэтиленовый пакет и уложен в картонную коробку, разные пневмодвигатели упакованы в пластиковый защитный кожух. Коробка в ПВХ-пленке.

17. Настройка и порядок работы (указание по эксплуатации)
Приемка и ввод в эксплуатацию:
- После вскрытия коробки, проверьте серийный номер на изделии, указанное в в накладной. Серийный номер должен отличаться. Гарантия на изделие привязана к данному серийному номеру. Коробку сохранить необходимо.
- Проверьте на механическое повреждение корпуса, претензии по механическому повреждению изделия принимаются до его первой эксплуатации

Ввод в эксплуатацию:
- Проверьте соответствие настроек бормашины (стоматологической установки) на соответствие техническим параметрам изделия, изложенным в пункте 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия.


Внешние системы.
- Изделие должно быть чистое, не должно быть царапин и вмятин.
- Возможно наличие масла внутри либо на изделии.

Подача воды.
- Подача воды через внешний канал, удостоверьтесь, что вода поступает без прерываний и попадает на бор.

Фиксация бора.
- Инструмент (бор) диаметром 2.35 мм и длиной 45 мм должен свободно устанавливаться и извлекаться посредством легкого нажатия зажимного кольца на корпусе наконечника.

Вращение бора.
- Вставьте инструмент (бор) в наконечник (см. пункт 18. Способ применения), медленно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно.
- Проверьте работу в средних и высоких оборотах микромотора, он не должен вибрировать либо колебаться не проверяя это путем расхождения в разные стороны всего наконечника (руки).
- Изделие готово к работе.
- Имейте в виду, что перед покупкой рекомендуем проводить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.
1. Установка наконечника:
- Установите наконечник на вал микромотора совместимой бормашины (см. пункт 19. "Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями"). На модели с фиброоптикой источник света на микромоторе должен совпадать с гнездом фиброоптики на наконечнике, в связи с этим необходимо после установки наконечника на микромотор проверить его до конца.
2. Отсоединение наконечника:
- Отсоедините наконечник от микромотора плавно и без бокового усилия.
3. Установка бора (инструмента):
- Замок открывается и закрывается путем вдавливания по кнопке, установка бора «открыто» и «закрыто» обозначено символами (Рис.1). После открытия замка вставьте инструмент (бор) на максимальную глубину, затем вращайте замок в противоположную сторону до щелчка чтобы его зафиксировать. Обратите внимание, что метилось действий (открытие/закрытие) сильно зависит от силы вашего зажимного устройства.

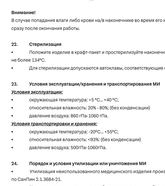
Рис.1

4. Извлечение бора
- Вращайте замок на корпусе до щелчка, затем вытащите инструмент (бор).

Внимание!
- Извлекайте бор только после полной остановки вращения инструмента.
- Используйте только инструменты высокого качества с балансировкой, соответствующими применяемым стандартам.
- Если инструмент застрял (не вытаскивается вне зависимости от положения замка), то необходимо обратиться в продавцу, авторизованному сервисную службу либо уполномоченному представителю. Повреждение наконечника, вызванное самостоятельным вытаскиванием инструмента без помощи сервиса либо специального инструмента, не покрывается гарантией.

Перечисление вращения на пневмодвигателе.

Положительное вращение: поворотное кольцо перемещается в сторону [F]

Реверсное вращение: поворотное кольцо перемещается в сторону [R]

Когда кольцо в нейтральном положении наконечник между [F] и [R], двигатель перестает вращаться.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.
Наконечники совместимы с другими соединениями наконечников должны соответствовать требованиям ISO 3964. Боры и прочий инструмент по ISO 1797. Изделия могут использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует стандарту IEC 60601-1 или аналогичным стандартам. Изделие планировалось совместно с Foshan Kunteng Medical Equipment Co., LTD, Building 2, No. 1, Chuangxin Yi Road, Tangliwan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China

20. Требования к реакции
Пользователь не должен самостоятельно производить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованному сервисному центру либо уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).
В первый раз, а также после каждого использования необходимо провести чистку, смазку и стерилизацию изделия.
чистка
- После окончания работы чистим грязи отсоединяя изделие.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае начавшейся ржавки в труднодоступных местах, используйте мягкую щетку для очистки.
- В случае работы при напряженном процедура, необходимо сразу после процедуры провести очистку от грязи. Погрузите только наконечника в дистиллированную воду либо спирт и включите скорость на микромотор 300 оборотов в минуту, потом в другую сторону в течение 15 секунд.

Внимание!
- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не чайте наконечник под краном воды.
- Не допускается дезинфекция в ультразвуковой ванне.

Смазка (Duriety)
- Вытащите инструмент из наконечника, обверите головку наконечника сухой салфеткой для контроля за чистотой внутреннего наконечника.
- Подайте смазку на головку наконечника сильным нажатием в механизм фиксации инструмента (бора) в течение 5 секунды (сек.2). Насадка должна быть в положении максимального зажима диаметра разрешенного инструмента.
- Вставьте наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку сильным нажатием со стороны подключения микромотора наконечника в течение 2 секунд (сек.3). В случае наличия грязи на сапфировом повторить.
- Подключите к установке и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса воздушным пистолетом.



Рис.2

Внимание!
В случае попадания влаги либо крови мыть наконечник во время его использования - чистку проводить сразу после окончания работы.

22. Стерилизация
- Положите изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклаве 3 при температуре не более 134°С.
- Для стерилизации допускается автоклавы, соответствующие стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

23. Условия эксплуатации,хранения и транспортирования МИ
Условия эксплуатации:
- окружающая температура: +5 °С... +40°С;
относительная влажность 20% - 80%, (без конденсации)
- давление воздуха: 860 ГПа-1060 ГПа.

Условия транспортировки и хранения:
- окружающая температура: -20°С... +55°С;
относительная влажность <93% (без конденсации)
- давление воздуха: 500 ГПа-1060 ГПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ
- Изделие и использованная комплектующего медицинского изделия производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.
- Утилизация медицинских изделий, контаминированных с биологическими жидкостями, должна проводиться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды
Воздействие на окружающую среду
С учетом выполнения требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировании и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства
- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 12 месяцев со дня производства, продавец, сервисная служба либо уполномоченный представитель имеет право запросить квалификацию, подписанную обеими сторонами для продления гарантии.
- Гарантия не распространяется на изделия и его компоненты, подвергшиеся естественному износу, не не мешающие нормальной его эксплуатации, нарушений эксплуатаций считается состояние изделия заводским техническим характеристикам (пункт 14).
- Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеется деформация корпуса в следствие механического повреждения.
- Гарантия не распространяется на повреждения изделия, вызванные самостоятельным вскрытием изделия и случаи его заправления при помощи сила руки либо сторонного инструмента.

27. Срок службы
Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, ввода в эксплуатацию должен быть в течение 3 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов
ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р МЭК 61366-1, ГОСТ Р ИСО 10323-1, СанПин 2.1.3684.