Инструкция по применению: Наконечник стоматологический угловой NIVO E100



Редакция 1.0

1. Наименование и юридический адрес производителя

Производитель:
Foshan Kunteng Medical Technology Co., Ltd (Фошань Сюнтэн Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)
Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Baishan Economic Cooperative Society Area, Tangtou Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование и юридический адрес уполномоченного представителя в России

ИП Мемедлинов Нияз Владимирович
(ИНН 771185864368, ОГРНИП 320774600237901)
Контакты для связи: почта: info@nivo.ru ,
Телефон +7 (985) 972 - 72 - 72

3. Наименование медицинского изделия

Стоматологические наконечники NIVO
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологический угловой NIVO E100

4. Комплектность поставки

- Наконечник стоматологический прямой – 1 шт.
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M200 - 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M500 - 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M600 - 1 шт. (при необходимости).
- Пневмодвигатель стоматологический NIVO M200 - 1 шт. (при необходимости).
- Инструкция по применению (вкладыш) – 1 шт.

5. Назначение по применению

Стоматологические наконечники NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов в передаче их вращения от бормашины при проведении стоматологических работ.

6. Условия и область применения

Условия применения: стоматологические кабинеты, зубоврачебные лаборатории, клиники и другие лечебно-профилактические учреждения.
Область применения: терапевтическая, ортопедическая и хирургическая стоматология.

7. Показания к применению

- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление размягченных зубных тканей и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхности зуба под установку коронок.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

8. Противопоказания

- Применение у пациентов с тяжелой степенью общей соматики.
- Пациенты с индивидуальной аллергией.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременная женщины и дети.

9. Меры предосторожности

- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия, и сохраните ее для дальнейшего использования.
- Перед использованием проверьте совместимость наконечника с контрольно-техническим оборудованием и поступающей скоростью. Избегайте работы по недолгим и не длинным осям.
- Перед работой с пациентом проверьте работу наконечника, чтобы не обратиться к продавцу либо уполномоченному представителю для определения возможности дальнейшей эксплуатации.
- В случае возникновения неисправности немедленно прекратите использование, немедленно прекратите работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному представителю.
- Изделие должно использоваться в нормальном состоянии и должно быть отремонтировано перед первым и каждым повторным использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проводите процедуру работоспособности на исходном образце.
- Использование изделия производится в защитных медицинских перчатках.

10. Возможные неисправности изделия (побочные действия)

На быть вызвано либо самим наконечником или побочными эффектами при использовании изделия в соответствии с предполагаемым клиническим применением, включая в использования дополнительной стоматологии оборудования.

11. Риски применения медицинского изделия


Группа управления риском производственного совокупный остаточный риск в соответствии с требованиями стандартов. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. После внедрения мер по контролю рисков не возникло новых рисков, которые могли бы повлиять на безопасность или эффективность устройства. Риски, связанные с Вулкан полимеров новых рисков в будущем потребуется провести повторную оценку риска.

12. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия

NIVO E100 Наконечник угловой стоматологический 2011, включающий: конструкцию света. Угловой стоматологический наконечник передает механическую энергию от вращения вала на микромотор через систему механизма привода инструмент (бор) во вращение в передаточном соотношении 20:1. Содержится в передаточном механизме стоматологического наконечника по ГОСТ 28364. Основные параметры и характеристики. В данной модели применен кнопочный механизм фиксации инструмента (бора) с высотой головки 19,5 мм.

Габаритные размеры, мм (ДхШхВ)	101,88 х 10,9 х 30,26 (± 1 х 15,00 (±))
Масса чего, г / масса брутто, г	Масса нетто: не более 110г Масса брутто: не более 200г
Передаточное соотношение	20:1 (ГОСТ ISO 7785-1:2011).
Напряжение Вакуум-Вода	0,2 МПа
Разрешенный инструмент	ISO 1797-1,тип F, диаметр бора 2,35 мм с начинкой и пылью
Масса	Не более 0,08 кгс
Кнопки извлечения отрезки из клинического устройства	Не менее 45 Н
Освещение рабочей области	Светодиод с температурой света
Скорость вращения	> 40000 об/мин
Крутящий момент	Не менее 4 мНсм
Шум	По ISO 3964
Уровень шума	Не превышает 70 дБА
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Кнопка из металлизированной силиконовой резиновой смеси

13. Маркировка. Условные обозначения на упаковке

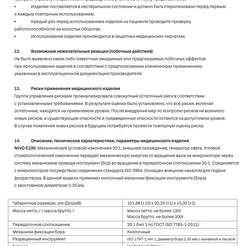

Пример: 2021 M01 - Дата изготовления изделия (2 января 2021), модель 1 - порядковый номер 001

14. Упаковка

- Наконечник поставляется в оригинальной упаковке изготовителя. Наконечники помещены в полиэтиленовый пакет, а затем уложены вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка с ПВХ-пленки. Плотная обеспечивает надежную защиту наконечника механическими и климатическими факторами во время транспортирования.
- Пневмодвигатели поставляются в оригинальной упаковке. Пневмодвигатель стоматологический помещен в полиэтиленовый пакет и уложен в картонную коробку, рядом с пневмодвигателем упакованы инструкция и шестигранный ключик. Коробка с ПВХ-пленки.

15. Настройка и порядок работы (Указания по эксплуатации)

Приемка и ввод в эксплуатацию.

- После получения убедитесь, проверьте серийный номер на изделии, упаковке и в накладной. Серийный номер на упаковке, отличается. Гарантия на изделие прекращается в данному серийному номеру, производителем.
- Проверьте на механическое повреждение корпуса, трещины по механическому повреждению изделия принимается до его первой эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию.

- Проверьте соответствие настроек бормашины стоматологической установки на соответствие технологии параметрам изделия, изложенным в пункте 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия.
- Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели:

Наличие соединения.

- Изделие должно быть чистым, не должно быть царапин и вмятин.

Наличие воздушной магистрали (при наличии).

- Подайте воду без воздушного спрея, удостоверьтесь, что вода поступает бесперебойно и спрея вода подает на конечном бора.

- Если спрей подается не под либо идет не из всех сопл, то проведите рекомендованное давление воды из установки (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).

Наличие воздушной магистрали (при наличии).

- Подайте воздух без воздушного потока вместе его струйного выхода на бормашине стоматологической установки необходимо проверить работоспособность спрея (подача воздуха к канал с водой).

Фиксация бора.

- Инструкция должен свободно сбалансировать и извлекаться посредством нажатия кнопки.

Кнопка.

- Убедитесь, что кнопка не подается спусковым крючком. Она должна быть надежно зафиксирована.

Вращение бора.

- Вставьте инструмент (бор) в наконечник (см. пункт 16. Способ применения), медленно покусите на крючок, он должен вращаться без биения (допустимое биение не более 0,05 мм).
- Проверьте работу скорости и давления на стоматологической установке, не он должен вибрировать, либо изобиться (см. проверьте на отсутствие вибрации, изобиться), шум должен быть в пределах нормы.

Свет.

- Светодиод (светодиодная лента) начинает светить при достижении соответствующего скорости, после чего светит равномерно, без прерывистой (мерцающей). При слишком низком оборотов светодиод (светодиодная лента) может мигать либо не светить.
- Изделие готово к работе.
- Изделие в ввод, что только проверку рекомендуем проводить раз в месяц, чтобы сохранить все состояние изделия.

16. Способ применения.

- Установка наконечника.
- Установите наконечник на ваш микромотор совместимой бормашины (см. пункт 19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями"). На изделие с фиксированием клина сжать на микромотор или клинок. Соедините бормашину с наконечником, в свою с этим необходимо после установки наконечника на микромотор проверить его до щелчка.
- Отсоединение наконечника.
- Отсоединение наконечник от микромотора.
- Установка бора.
- Хвостовик инструмента (бора) должен совпадать с пазом в механизме фиксации бора, для этого вставьте его в наконечник. Нажмите угловой кругшайбой бор до момента, пока бор войдет в паз, затем поташите его из наконечника слабую и отпустите кнопку. Аналогично извлечь, что качать действие (допустимое положение рычаг) подать вашего кнопочного замена.

Использование.

- Нажмите на кнопку по центру конечника пальца, удерживая ее, извлеките инструмент. Все действия должны быть плавными, без резких движений, чтобы избежать повреждения. Для более подробного использования узнав для извлечения инструмента, рекомендуется заменить его в новой. При сохранении проблемы следует обратиться в сервисную службу.

Внимание!

- Извлекайте бор только после полной остановки вращения инструмента.
- Используйте только боры надлежащего качества и соответствия, соответствующими применимых стандартов.
- Если инструмент застрял (не вытаскивается при нажатии на кнопку), то необходимо обратиться к продавцу, авторизованному сервисную службу либо уполномоченному представителю. Попытка извлечения инструмента самостоятельно может повредить инструмента при помощи силы либо спросите инструмента, не извлекается.
- Работа с инструментом без фиксации.
- Вставьте наконечник, поверните его вверху часть против часовой стрелки так, чтобы указатель (стрелка) на наконечнике указал на положение отметка (Рис.) и отсоедините их. Сборка производится в обратном порядке.

Рис.1

Внимание!

- Разбор данного наконечника требуется для его более глубокой квалификацией частью. В случае неосвоенности практикующих авторизации сначала/разбор - необходимо проводить часть без его разбора.

17. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.

Инструкция, данный наконечник стоматологический совместимость соответствовать требованиям ISO 3964. Боров и прочий инструмент по ISO 1797. Изделия могут использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует требованиям ISO 3964 (ГОСТ Р ИСО 3964).

Совместимость с оборудованием должна быть подтверждена (оценена) производителем (или уполномоченным представителем) перед использованием. Ответственность за несовместимость, возникшую из-за неправильного выбора оборудования, несет пользователь.

Чистка

- После окончания работы частицы разных отходов инструмента и наконечника.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае накопленной грязи и трудодоступных местах, используйте мягкую щетку для очистки.
- В случае работы на открытом воздухе, необходимо использовать после проведены проверки чистоты и мусора. Попадание пыли наконечника в передаточный вход либо спрея и включение скорости в наконечнике. Попадание пыли, попавшей в воду, попав в воду из спрея в течение 15 секунд.

Внимание!

- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечник под краном воды.
- Не допускайте длительное в ультразвуковой ванне.

Смазка (ручная)

- Выполните инструмент (бор) из наконечника, обильно полью наконечника сухой салфетки для контроля за чистотой и качеством механизма.
- Подайте смазку из баллончика сильным нажатием в наконечник физическую инструмента (бора) в течение 1 секунды (рис 2). Насадка должна быть с носиком диаметром меньше диаметра рекомендуемого инструмента.
- Вставьте наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку сильным нажатием со струйно издалением микроаэрозоля в течение 3 секунд (рис 3). В случае наличия грязи на изделии повторите повторить.
- Подключите к установке и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с корпуса воздушным пистолетом.

Рис.2 Рис.3

Внимание!

В случае попадания влаги либо краски на / в наконечник во время его использования – четко прекрати сразу после окончания использования.

18. Стерилизация

- Положите изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклаве типа В при температуре не более 134°С.
- Для стерилизации результатов автоклава, соответствующим стандарту ГОСТ Р ЕН 13060-2011.

19. Условия эксплуатации хранения и транспортирования МИ

Условия эксплуатации:

- окружающая температура: +5 °С... +40 °С;
- относительная влажность: 20% - 80%, (без конденсата);
- атмосферное давление: 860 -1060 гПа.

Условия транспортирования и хранения:

- окружающая температура: -10°С... +50°С;
- относительная влажность: <93% (без конденсата)
- давление воздуха: 500 гПа-1060 гПа.

20. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ

Утилизация неисправных изделий и комплектующих изделия производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.

Утилизация медицинских изделий, контаминированных с биологическими жидкостями, должна проводиться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

21. Требования по охране окружающей среды

Воздействие на окружающую среду

С учетом выполнения требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировании и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

22. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 12 месяцев со дня производства, продавец, сервисная служба или уполномоченный представитель может провести ремонт, техническое обслуживание изделия за отдельную плату.
- Гарантия на распространяется на изделия, на которые имеется документальное изготуса в следствие естественного износа.
- Гарантия не распространяется на повреждения изделия, вызванные самостоятельным выполнением инструмента в случае его застревания при помощи силы, руки либо стороннего инструмента.

23. Сроки службы

Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, между в эксплуатацией должен быть в течение 3 лет со дня производства.

24. Перечень применяемых стандартов

ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6. ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р ИСО 80369-1, ГОСТ Р ИСО 10333-1, СанПин 2.1.3684.