Инструкция по применению:
Наконечники стоматологический угловой **NIVO E500**



Редакция 1.0

1. Назначение и юридический адрес производителя

Производитель:
Foshan Kunteng Medical Technology Co., Ltd. (Фошань Кунтэн Медикал Текнолоджи Ко, Лтд.)
Место производства:
No. 1, 6th Floor, Block C, Bainan Economic Cooperative Society Area, Tangbu Community, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China

2. Наименование медицинского изделия

Стоматологические наконечники NIVO
Наименование варианта исполнения:
Наконечник стоматологический угловой NIVO E500

3. Комплектность поставки

- Наконечник стоматологический прямой - 1 шт.
- Наконечник стоматологический угловой NIVO - 1 шт. (при необходимости).
- Наконечник стоматологический угловой NIVO M050 - 1 шт. (при необходимости).
- Наконечник стоматологический угловой NIVO M130 - 1 шт. (при необходимости).
- Наконечник стоматологический угловой NIVO M200 - 1 шт. (при необходимости).
- Инструкция по применению (вкладыш) - 1 шт.

4. Назначение по применению

Стоматологические наконечники NIVO предназначены для закрепления режущих и полирующих инструментов и передачи им вращения от бормашины при проведении стоматологических работ.

5. Классификация медицинского изделия

- Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **ВИДЗМ: 119690**
- Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий: **2б**
- По степени защиты от проникновения влаги и пыли - **IPX0** - нет защиты от проникновения внутрь корпуса влаги.

7. Потенциальные пользователи

Используется только квалифицированным медицинским персоналом для стоматологических процедур.

8. Условия применения и область применения

Условия применения: стоматологические кабинеты, лабораторные, клинические и другие лечебно-профилактические учреждения.

Область применения: терапевтическая, хирургическая и ортопедическая стоматология.

9. Показания к применению

- Препарирование кариозных полостей.
- Удаление размягченных материалов и пломбировочных масс.
- Подготовка поверхности зуба под установку коронок.
- Полировка зубов и реставрационных поверхностей.

10. Противопоказания

- Применение у пациентов с тяжелой степенью общего соматического состояния.
- Пациенты с кардиостимуляторами.
- Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Беременные женщины и дети.

11. Меры предосторожности

- Перед началом использования внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, чтобы полностью понять функции изделия, а также меры предосторожности.
- Пользователь несет ответственность за операционный контроль, техническое обслуживание и источники силу изделия. Избегайте работы с изделием из-за усталости и не-рабочего его.
- В случае падения или удара изделия, прекратите работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному техническому специалисту для проведения дальнейшей эксплуатации.
- В случае нарушения функционирования изделия по мнению пользователя, немедленно прекратите работу и обратитесь к продавцу либо уполномоченному техническому специалисту.
- Изделие после контакта с инфекционным составом и должно быть стерилизовано перед первым и каждым последующим использованием.
- Каждый раз перед использованием изделия на пациенте проведите проверку работоспособности на холостом ходу.
- Использование изделия производящая в защитных масках/очках.

12. Возможные нежелательные реакции (побочные действия)

Не было выявлено каких-либо известных неудачных или предсказуемых побочных эффектов при использовании изделия в соответствии с предполагаемыми клиническими применениями, использованием и предупреждениями производителя.

13. Риски применения медицинского изделия


Группа управления рисками проанализировала основной остаточный риск в соответствии с установленными требованиями. В результате оценки было установлено, что все риски, включая остаточные, находятся на приемлемом уровне. После внедрения мер по контролю рисков и возможных новых рисков, а существенное отрицательное влияние на преимущества отмечается на допустимом уровне. В случае появления новых рисков в будущем потребуется повторная оценка рисков.

14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия

NIVO E500. Механический угловой наконечник 1:5, внешнее охлаждение, фиброптика. Угловой стоматологический наконечник предназначен для передачи вращения от вращения вала на микромоторе через систему механизмов прямой инструмент (бор) во вращение в передаточное соотношение 1:5. Соединяется с микромотором посредством стандартного соединения ISO 3964. Оснащен внешним каналом для подачи физраствора. В данной модели головка наконечника имеет кнопку для снятия бора. Наконечник имеет диаметр шейки 2.6 мм. Свет реализован путем передачи источника света от микромотора через оптоволокно вплоть до инструментов.

Габаритные размеры, мм (Д/ш/в)	96,80 (±10) x 25,00 (±1) x 14,00 (±1)
Масса нетто / масса брутто, кг	Масса нетто: не более 120г Масса брутто: не более 200г
Передаточное соотношение	1:4.2 (тип 3 по ГОСТ ISO 7785-1-2011)
Механизм фиксации бора	Кнопочный
Расходный инструмент	ISO 1797-1 Тип 3 (диаметр 2,4 мм, цилиндрический с коническим или сферическим торцом 2h (тип 3) по ISO 1797-1:2011)
Биение	не более 0,08 мм
Усилие извлечения отрезки из зажимного устройства	не менее 22 Н
Освещение рабочей области	Фиброоптика, не менее 7000 Лк
Скорость вращения	> 40000 об/мин
Крутящий момент	не менее 2 Н*см
Соединение	По ISO 3964
Уровень шума	Не превышает 70 дБА
Используемые материалы	Нержавеющая сталь марки 303 Корпус из металлической силиконовой резиновой смеси

15. Маркировка. Условные обозначения на упаковке

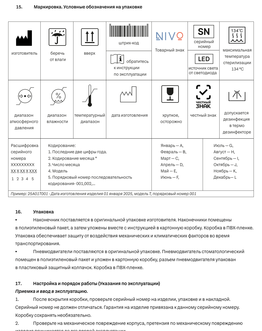

Пример: 25A31502 - Дата изготовления изделия 31 января 2025, модель 2, порядковый номер 02.

16. Упаковка

- Наконечники поставляются в оригинальной упаковке изготовителя. Наконечники помещены в полиэтиленовый пакет, а затем уложены вместе с инструкцией в картонную коробку. Коробка в ПЭФ-пленке. Упаковка обеспечивает защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки.
- Пневмодвигатели поставляются в оригинальной упаковке. Пневмодвигатель стоматологический помещен в полиэтиленовый пакет и уложен в картонную коробку, рядом пневмодвигателя упакован в пластиковый защитный чехол. Коробка в ПЭФ-пленке.

17. Настройка и порядок работы (указания по эксплуатации)

Приемка и ввод в эксплуатацию

1. После вскрытия коробки, проверьте серийный номер на изделии, упаковке и в накладной. Серийный номер на изделии должен совпадать с номером на упаковке и в сопроводительной книжке. Коробку сохранить необязательно.
2. Проверьте на механические повреждения корпуса, проверьте на механическую повреждению изделия убедитесь в его первой эксплуатации.

Ввод в эксплуатацию.

1. Проверьте соответствие настроек бормашины (стоматологической установки) на соответствие технических характеристик изделия, параметрам медицинского изделия.
2. Подключите изделие к оборудованию, проверьте следующие показатели:

Внешнее состояние.

- Изделие должно быть чистое, не должно быть царапин и вмятин.
- Возможно наличие масла внутри либо на изделии.

Подача воды.

- Подайте воду без воздушного стресс, удостоверьтесь, что вода поступает бесперебойно и струя воды падает на конец бора.
- Если струя не попадает на бор либо идет не из всех сопл, то проверьте рекомендованное давление воды на установке (см п. 14. Описание, технические характеристики, параметры медицинского изделия).

Для обеспечения надежной работы всего потока вместе его отдельных частей на бормашине (стоматологической установке) необходимо активировать соответствующую функцию (подача воздуха и воды) и жидкостей.

Фиксация бора.

- Инструмент (бор) должен свободно устанавливаться и извлекаться посредством нажатия кнопки.

Кнопка.

- Убедитесь, что кнопка не подвергается спонтанному вдавлению. Она должна быть надежно закреплена.

Вращение бора.

- Вставьте инструмент (бор) в наконечник (см. пункт 18. Способ применения), медленно покрутите его рукой, он должен вращаться плавно с равномерным сопротивлением при вращении по рубчикам.
- Проверьте работу на средних и высоких оборотах микромотора, не должен вибрировать либо колебаться (не проверяйте это путем расчавливания в разные стороны всего механизма рукой).

Свет.

- Фиброоптика проводит свет от гнезднодцателя. Светодиод определяется красным светом на переходнике.
- Изделие готово к работе.
- Имейте в виду, что перед проверку рекомендуется проводить раз в месяц, чтобы следить за состоянием наконечника.

18. Способ применения.

1. Установка наконечника.
2. Установите наконечник на вал микромотора соответствующей бормашины (см. пункт 19. "Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями"). На модели с фиброоптикой источник света в наконечнике должен совпадать с источником света фиброоптики на наконечнике, в связи с этим необходимо после установки наконечника на микромотор проверить его до щелчка.
3. Отсоединение наконечника
4. Отсоединить наконечник от микромотора.
5. Установка бора
6. Нажмите кнопку зажима и продвиньте бор в зажим до предельного состояния, затем отпустите кнопку. Проверьте надежность фиксации бора рукой.
7. Извлечение бора.
8. Нажмите кнопку зажима и, извлеките бор.

ВАЖНО! Инструмент должен быть надежно зафиксирован после любой остановки вращения. В противном случае, служить, от износа металла при соприкосновении, попадет в подшипник, что приведет к их преждевременному выходу из строя.

Внимание!

- Извлекайте бор только после полной остановки вращения инструмента.
- Если инструмент застрял (не высвобождается при нажатии на кнопку), то необходимо обратиться к продавцу, уполномоченному инженерно-службу либо уполномоченную представителя.

Перключение вращения на пневмодвигатель.

- **Пользовательское вращение:** поверните кольцо переключателя в сторону [F].
- **Реверсное вращение:** поверните кольцо переключателя в сторону [R].
- Когда кольцо переключателя находится между [F] и [R], двигатель перестает вращаться.

19. Возможность интеграции с другими медицинскими изделиями.

Конструкция, размеры и другие характеристики наконечника должны соответствовать требованиям ISO 3964. Вход и привод инструмент по ISO 1797. Изделие могут использоваться только в сочетании с оборудованием, которое соответствует требованиям ISO 60601-1.

Изделие применяется совместно с микромотором NSK, Kavo, Kaltenbach, Dürr Dental, Sirona, Ramtec, Ретистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/04648 от 24.06.2009 г. Установка стоматологическая «Sign» (Производитель и страна-производитель: S30, S60, S90, U30, U120, U500, V500).

Производитель: Foshan Kunteng Medical Technology Co., Ltd.(Фошань Кунтэн Медикал Текнолоджи Ко, Лтд.), Building 2, No. 1, Chuangye Yi Road, "Tangjiawan Town, Zhuhai City, Guangdong Province, P.R. China.

20. Требования к ремонту

Пользователь должен самостоятельно производить ремонт изделия. В случае неисправности обратитесь к продавцу, авторизованную сервисную службу либо уполномоченному представителю.

21. Требования к техническому обслуживанию (методы очистки, дезинфекции и смазки).

В первый раз, а также после каждого применения изделие необходимо тщательно чистку, смазку и стерилизацию изделия.

Чистка

- После окончания работы чистите рукавом оставшиеся изделие от микромотора.
- Протрите изделие влажной салфеткой с небольшим содержанием спирта. В случае наконечной грязи в труднодоступных местах, используйте мягкую щетку для очистки.
- В случае работы при неудовлетворительном процедуре, необходимо сразу после процедуры провести очистку от крови. Погружение под наконечника в дистиллированную воду либо спирт и включите скорость на микромотор 300 оборотов, сначала в одну, потом в другую сторону в течение 15 секунд.

Внимание!

- Не погружайте инструменты в химические растворители и любые растворы.
- Не мойте наконечник под краном воды.
- Не используйте для чистки наконечника щетки.

Смазка (ручная)

- Вытащите инструмент (бор) из наконечника, оберните головку наконечника сухой салфеткой для контроля за частотой вращения наконечника.
- Подайте смазку из баллончика сильным нажатием в механизм внутри инструмента (бора) в течение 1 секунды (рис.1). подача должна быть с носком диаметром меньше диаметра разрешенного инструмента.
- Вставьте наконечник в руку головкой вниз, подайте смазку сильным нажатием со стороны подключения микромотора четырьмя в течение 2 секунд (рис.2). В случае наличия грязи на сцеплении - повторить.
- Подключите к установке и включить на холостом ходу в течение 15 секунд, излишки масла можно сдуть с кнопку воздушным пистолетом.



Внимание!

В случае попадания влаги либо крови на / в наконечника во время его использования - чистку проводить сразу после окончания использования.

22. Стерилизация

- Положите изделие в крафт-пакет и простерилизуйте наконечник в автоклаве типа B при температуре не более 134°С.
- Для стерилизации допускается автоклав, соответствующий ГОСТ EN 13060-2011.

23. Условия эксплуатации/хранения и транспортирования МИ

Условия эксплуатации:

- окружающая температура: +5 °С ... +40 °С;
- относительная влажность: 20% - 80% (без конденсации);
- давление воздуха: 860 гПа-1060 гПа.

Условия транспортирования и хранения:

- окружающая температура: -20°С... +55°С;
- относительная влажность: < 90% (без конденсации)
- давление воздуха: 500гПа-1060гПа.

24. Порядок и условия утилизации или уничтожения МИ

Утилизация неиспользованного медицинского изделия производится в соответствии с классом А по СанПин 2.1.3684-21.

Утилизация медицинских изделий, контаминированных с биологическими жидкостями, должна осуществляться в соответствии с классом Б СанПин 2.1.3684-21.

25. Требования по охране окружающей среды

Воздействие на окружающую среду

С учетом выполнения требований эксплуатационной документации данное изделие при использовании, транспортировании и хранении не оказывает негативного воздействия на человека и окружающую среду.

26. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи изделия. В случае истечения 12 месяцев со дня производства, продавец, сервисная служба либо уполномоченный представитель имеет право запросить товарную накладную, подписанную обеими сторонами для определения даты продажи.

Гарантия не распространяется на изделия и его компоненты, подвергшиеся естественному износу, но не имеющие производственного его эксплуатации. Нормальной эксплуатацией считается соответствие изделия заводским техническим характеристикам (см. пункт 14).

Гарантия не распространяется на изделия, на которых имеются деформации корпуса в следствие механического повреждения.

Гарантия не распространяется на наконечники изделия, вышедшие самостоятельным использованием инструмента в случае его застревания при помощи силы рычаг либо сторонного инструмента.

27. Сроки службы

Ожидаемый срок службы - 3 года со дня начала эксплуатации, вида в эксплуатацию должен быть в течение 3 лет со дня производства.

28. Перечень применяемых стандартов

ГОСТ Р 50444, ГОСТ ISO 7785-1, ГОСТ ISO 7785-2, ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-1-6, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, ГОСТ Р ИСО 62366-1, ГОСТ Р ИСО 15223-1, СанПин 2.1.3684.