ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА НАКОНЕЧНИКОВ



Потребуется: тестер цанги | лупа | стоматологическая установка | фальшборы 1,6 и 2,35 мм

0 Подготовьте наконечник

Предварительно очистите внешний корпус, смажьте привод и цанговый зажим, продуйте от излишков масла (см. инструкцию производителя)


Убедитесь, что на корпусе наконечника нет грязи, LED и пространство вокруг чистое, сам наконечник без остатков влаги и масла

1 Осмотрите под лупой

Проверьте наиболее частые места повреждений при падении: головку со всех сторон и соединение с приводом





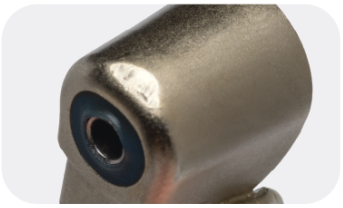


2 Замерьте хват цанги




Нажмите кнопку и откройте зажим



Вставьте тестер и потяните

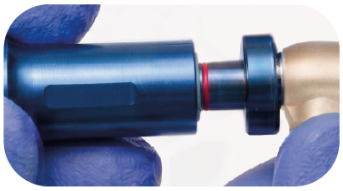

Сила зажима недостаточная, бор может вылететь

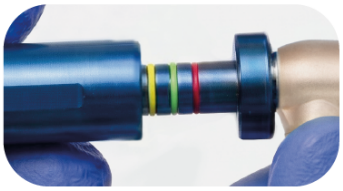

Все в порядке

3 Проверка на люфт





ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ

Вставьте фальшбор 2,35 мм, включите привод на небольших оборотах и легким касанием проверьте, отклоняется ли фальшбор в сторону во время работы мотора.

ДЛЯ ТУРБИННЫХ НАКОНЕЧНИКОВ И ПОВЫШАЮЩИХ

Вставьте фальшбор 1,6 мм, проверьте легким касанием на люфт. Затем включите привод и визуально проверьте отклонение бора во время работы.

4 Проверка охлаждения

Не отключая наконечник от установки, включите привод и охлаждение, проверьте, что вода идет со всех форсунок и попадает на бор. На некоторых моделях может не быть функции спрея, сверяйтесь с инструкцией к конкретному наконечнику.

Если наконечник не прошел какую-то из проверок, то рекомендуем отложить наконечник и обратиться в сервис за подробными инструкциями, что делать в той или иной ситуации.